

snuza®

PICO

Smart Wearable Monitor

Giyilebilir Akıllı Takip Cihazı

KULLANMA KILAVUZU

KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARIN TAMAMINI OKUYUN



PPM00201

ÖNEMLİ

Snuza Pico bebek bakımına yardımcı bir cihaz olup medikal cihaz sınıfında değildir. Herhangi bir hastalığın tanısı, önleme veya takibi için uygun değildir. Snuza Pico bebeğinizle beraber aynı yatakta uyurken kullanıma uygun değildir.

SNUZA, Snuza International (Pty) Ltd'nin tescilli markasıdır.



Snuza International (Pty) Ltd

Unit 11 Roeland Square

Roeland Street

Cape Town 8001

South Africa



FCC ID: 2A13601

IC: 21736-01

Üretim yeri: Güney Afrika

Patentlidir

İÇERİK

1. ÖNEMLİ - ÖNCELİKLİ OLARAK OKUYUN	1
2. Giriş	3
3. Önlemler ve Kontra Endikasyonlar	5
4. Parçaların Tanımlanması	6
5. Hızlı Kullanma Kılavuzu (HKK)	8
6. Bebek Bezinin Bağlanması	10
7. Çalıştırma	11
7.1 Snuz Pico'nun Sabitlenmesi	11
7.2 Cihazı Açma/Kapama	12
7.3 Duraklatma	12
7.4 Cihazın Şarj Edilmesi	12
7.5 Gösterge Lambaları	13
7.6 Hareket Gösterge Lambası	14
7.7 Bluetooth Düşük Enerji	15
7.8 Pil Göstergeleri	15
7.9 Alarm Göstergeleri	16
7.10 Şarj Gösterge Lambaları	16
7.11 Giyim	16
8. Uyandırma Alarmı	17
9. Pil	17
9.1 Pil Göstergesi	17
9.2 Pil Ömrü	18
10. Bakım	18
10.1 Cihazın İmhası	18
10.2 Temizleme ve Saklama	18


11. Sorun Giderme	19
12. Feragatname	19
13. Garanti	19
14. Mevzuata İlişkin Bilgiler	20
15. Teknik Tanımlar	21

1. ÖNEMLİ - ÖNCELİKLİ OLARAK OKUYUN!

Snuza Pico, bebeğinizin uykusu esnasında bezine tutturularak hareket oranı, vücut sıcaklığı ve vücut pozisyonununun devamlı olarak izlenmesi ve bu verilerin düşük enerji teknolojisi ile akıllı cihazınıza Bluetooth yoluyla aktarılmasını sağlayan bir takip cihazıdır.

*** Her kullanıcı, aynı anda tek bir akıllı cihazla eşleştirilebilen, 4 Snuza Pico ile sınırlandırılmıştır.*

*** Snuza Pico'ya aynı anda 1'den fazla cihaz bağlanamaz.*

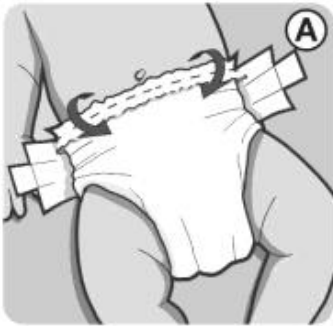

HER ZAMAN:

Snuza Pico'nun bezde sabit bir şekilde durmasını sağlamak için doğru ölçülerde bez kullanın.

Snuza Pico'yu takmadan önce bezin üst kısmını kıvrın ve yapışkan bantları kullanarak bezin bebeğin beline tam oturmasını sağlayın.



Snuza Pico'yu tutturmak için mandala basarak klipsi kaldırın. Klipsi aşağıya doğru katlanmış olan bezin üzerine tamamen

geçecek şekilde tutturun. Mandalı kapatın ve kilitleyin. Klipsin beze takıldıktan sonra tam olarak kapandığından emin olun.

Cihazı başlatmak için güç düğmesine basın; başlama sinyali Snuzza Pico'nun açıldığını bildirecektir. Akıllı cihazınızda uygulamaya giriş yapın. Snuzza Pico akıllı cihazınızdaki uygulama ile senkronize olacak ve veriler ekranda görülecektir. Not: Uygulama otomatik olarak senkronize olmazsa refresh butonuna basın.

Doğru vücut pozisyon bilgisi için, ayarlar (settings) sayfasına giderek Snuzza Pico'nun bezde nereye takıldığını işaretleyin. Snuzza Pico'nun beze sıkı bir şekilde tutturulduğundan emin olun.



Bebeğinizin abdominal hareketlerinin takip edildiğinden emin olmak için her zaman yukarıdaki aşamaları takip edin.

NOT:

Snuzza Pico'nun mandalının zarar görmemesi için cihazı dikkatle kullanın. Seyahat esnasında cihazı daima şarj ünitesi içinde muhafaza edin.

2. GİRİŞ



Kullanım Amacı:

Snuza Pico bebeğiniz uyuduğu esnasa karın hareketlerini kolay ve güvenli bir şekilde takip eden taşınabilir bebek hareket takip cihazıdır.

Kullanıcı:

Cihaz bebek bakanların kullanımı için tasarlanmıştır. Kullanıcıların kullanma kılavuzunda belirtilen talimatları ve güvenlik önlemlerini tamamıyla okuyup anlamaları gerekmektedir.

Kullanım Ortamı:

Ev içi

Snuza Pico, bebeğiniz uyuduğu sırada karın hareketlerini güvenle takip ederek solunumda meydana gelebilecek herhangi bir aksama halinde erken müdahale fırsatı yaratmaktadır.

Snuza Pico'nun bebeğinizin bezine sıkı bir şekilde tutturulması önemlidir. Ek olarak bant, kablo, sensör pedi, düz zemin veya harici güç

gerektirmemektedir. Snuzza Pico bebeęinizle beraber aynı yatakta uyurken kullanıma uygun deęildir.

Snuzza Pico, en ufak karın hareketini dahi algılayarak bebeęinizin hareketi 20 saniye boyunca algılanamadığı takdirde size uyarı verecektir. Snuzza Pico ilk 15 saniyeden sonra hafifçe titreşim verir.

Titreşimle uyandırma başarılı olur ve solunum algılanırsa Snuzza Pico bebeęin hareketlerini takip etmeye devam edecektir. 3 defa Titreşimle Uyandırma işleminin ardından, Uyandırma Alarmı size bebeęinizin karın hareketlerinin 3 defa 15 saniyelik periyotlarla aksadığını bildirir.

Uyandırma Alarmı kısa sinyal sesi ve Hareket Gösterge Lambasının (1) 2 saniyede bir kırmızı yanmasıyla anlaşılır. Uyandırma Alarmının aktif olduğu durumda solunum takibi devam eder ancak bakıcının bebeęi kontrol etmesi gerekmektedir. Uyandırma Alarmı cihaz kapatılıp açılarak sıfırlanabilir. Cihazın bu özellięi akıllı telefonunuzda bulunan uygulama üzerinden kapatılabilir. 15 saniye sonunda gerçekleşen her Uyandırma Alarmı akıllı cihaz uygulaması üzerinden size bildirilecektir.

Snuzza Pico aynı zamanda bebeęinizin pozisyonu ve cilt sıcaklığını ölçer.

3. ÖNLEMLER VE KONTRA ENDİKASYONLAR

- Cihaz Obstüktif Apne gibi durum veya hastalıkların önlenmesi veya takibi için kullanıma uygun değildir.
- Uçak, araba veya puset gibi harici kaynaklardan gelen hareket Snuza Pico sensörü tarafından algılanacağından cihazın bunlar gibi hareket/titreşim kaynaklarının olması durumunda kullanılması doğru değildir.
- Takip edilen bebeğin kendi yatağında yatar durumda olması gerekmektedir. Bebeğiniz ile aynı yatakta uymanız durumunda cihazın sensörü sizden kaynaklanabilecek hareketleri algılayacağından bebeğinizin solunumunda aksama olsa dahi sizi uyarmayabilir.
- Cep telefonları, sesli ve görsel bebek takip cihazları, kablosuz telefonlar, telsizler, kablosuz modem gibi radyo frekansı yayan cihazlar Snuza Pico'nun hareket takibine engel olabileceğinden cihazın bu kaynaklardan ve elektrik kablolarından en az 2 metre uzakta olacak şekilde kullanılmasına özen gösterilmelidir.
- Cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
- Cihaz sadece bir bebek üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Herhangi bir şekilde cihazdan kopmuş veya ayrılmış küçük parçalar boğulma riskine sebep olabilir.
- Bebeğinizde cihazın tenine temas ettiği noktada herhangi bir hassasiyet gelişmesi durumunda lütfen madde 7.11'i okuyun. Hassasiyet devam ederse bizimle irtibata geçin www.snuza.com.
- Cihazın zarar görerek işlevini yitirmesini önlemek için evcil hayvanlardan, haşerattan ve diğer çocuklardan uzak tutunuz.
- Ses Çıkış Deliğine (5) herhangi bir şey sokmayın.
- Ses Çıkış Deliğinden su girmemesine dikkat edin.
- Klipsi (11) açmak/kapamak/eğmek için gereğinden fazla güç kullanmayın.

4. PARÇALARIN TANIMLANMASI



Ön

- 1 - Pil Gösterge Lambası
- 2 - Hareket Gösterge Lambası
- 3 - Alarm Gösterge Lambası
- 4 - Bluetooth ve Bildirim Lambası
- 5 - Hoparlör çıkışları
- 6 - Power/mode tuşu
- 7 - Klips mandalı



Arka

- 8 - Temazsız Sensör
- 9 - Şarj Pimleri
- 10 - Isı Sensörü
- 11 - Klips



Şarj Ünitesi

- 12 - Şarj Kablosu
- 13 - Güç Gösterge Lambası
- 14 - Şarj Ünitesi

5. HIZLI KULLANMA KILAVUZU

1. Adım: Snuzza Pico'nuzu şarj edin.

Kabloyu Şarj ünitesine takın. Snuzza Pico'nuzun şarj ünitesine tam olarak oturduğundan emin olun. Snuzza'nızın şarj olmasını bekleyin.

2. Adım: Snuzza Connect Uygulamasını İndirin

Snuzza Connect IOS ve Android cihazlarla uyumludur.

Akıllı cihaz minimum sistem gereksinimleri:

- Bluetooth 4.0
- Apple cihazlar: iOS 8.0 veya sonrası
- Android cihazlar: Android 4.4 ve sonrası

3. Adım: Snuzza Pico'nuzu kaydedin

connect.snuzza.com adresini ziyaret ederek "new membership" kısmında bulunan boşlukları doldurun.

Belirttiğiniz e-posta adresine onay yazısı gelecektir. Cihaz onaylandıktan sonra, Snuzza portalına yönlendirileceksiniz. Menü içerisinde "Device Registration" butonuna tıklayın.

Cihazınızın seri numarasını ve istenen diğer detayları belirtin. Snuzza Pico'nun seri numarasını paketin veya cihazın yan tarafında bulabilirsiniz.

4. Adım: Snuzza Pico'nuzu bebeğin bezine takın

Bezin üst kısmını aşağıya katlayarak bantlar yardımıyla boyunu ayarlayın. Mandala basarak klipsi açın ve Snuzza Pico'yu bebeğinizin bezine tutturun.

5. Adım: Cihaz yerleştirildikten sonra klipsin tam kapandığından emin olun

Sinyal sesi duyulana ve tüm gösterge lambaları eşzamanlı yanana kadar açma düğmesine basın. Başlangıç sinyalinden hemen sonra pil lambası, bataryanın tamamen dolu olduğunu belirtmek üzere yeşil yanacaktır.

Uygulama ekranında "refresh" butonuna basarak Snuzza Pico'nuzu akıllı

cihazınızla senkronize edin. Artık bebeğinizin hareketlerini uygulama üzerinden takip edebilirsiniz.

SNUZA PICO'NUN TEMEL FONKSİYONLARI

Hareket Gösterge Lambası her harekette yeşil yanar.

15 saniye boyunca hareket algılanmadığı takdirde Snuzza Pico bebeğinizi uyandırmak için titreşim verir.

Takip eden 5 saniye sonunda hareket algılanmadığı takdirde Snuzza Pico sesli alarm verecektir.



SNUZA CONNECT UYGULAMASININ TEMEL FONKSİYONLARI

Snuzza Connect Uygulaması size bebeğinizin solunum oranı, pozisyonu, ateşi, düşme algılanması, pil seviyesi ve Snuzza Pico'nun klipsi açıldığı zaman haber verir. Uyarı seçeneklerini uygulama üzerinden kendinize göre düzenleyebilirsiniz.

Uygulama üzerindeki uyarılar soldan sağa doğru kaydırarak kapatılabilir. Bu fonksiyon solunum oranı ve düşme durumlarında kullanılmaz. Bu uyarılar sadece cihaz üzerindeki güç düğmesine basarak kapatılabilirler. Tüm uyarı ve bilgileri alabilmek için akıllı cihazınızın uygulamaya bağlandığından emin olun.

6. BEBEK BEZİNİN BAĞLANMASI

Önemli: Snuzza Pico'nun doğru çalışması için bebek bezinin doğru şekilde bağlanması önemlidir. Bezin üst kısmında bulunan ince kulağın kalın olan bant üzerinde doğru katlanarak bağlanması gerekmektedir (Snuzza Pico bu kısma tutturulacaktır). Bezin göbek deliğinin hemen altından bebeğin bel kısmına tam olarak oturması gerekir. Bol gelecek şekilde bağlanmış bez cihazın sensörünün bebeğin karnıyla temasının kesilerek yanlış alarm vermesine sebep olacaktır. Çok dolu veya ıslak bir bez de temassızlık oluşmasına sebep olabilir. Eğer bebeğiniz yanına yatıyorsa Snuzza Pico yatağa değmeyecek şekilde göbek deliğinin yanına doğru tutturulabilir.

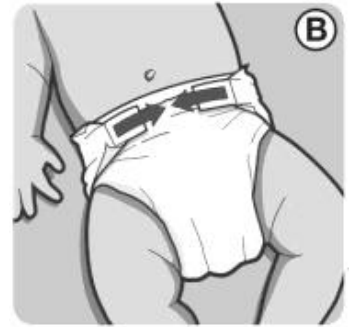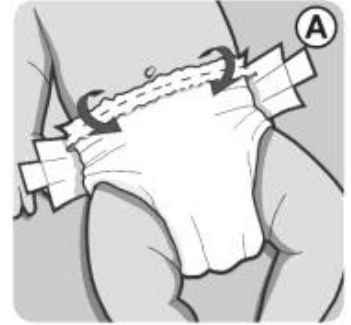


7. ÇALIŞTIRMA

7.1 Snuzza Pico'nun Sabitlemesi

Snuzza takip cihazını tuttururken parmaklarınızı bebeğinizin bezi ile karnı arasına sokmanız gerekir. Cihazı beze sıkı bir şekilde oturduğundan ve cihaz gövdesinin bebeğin tenine temas etmediğinden emin olun.

Snuzza Pico'yu mandalın sonuna kadar bezi içine alacak şekilde takın. Klipsi açmak için ön taraftaki mandala bastırın. Klipsi bezin üzerinden, bezi tamamen içine alacak şekilde takın. Klipsi kapatın ve gösterildiği şekilde kilitleyin:-

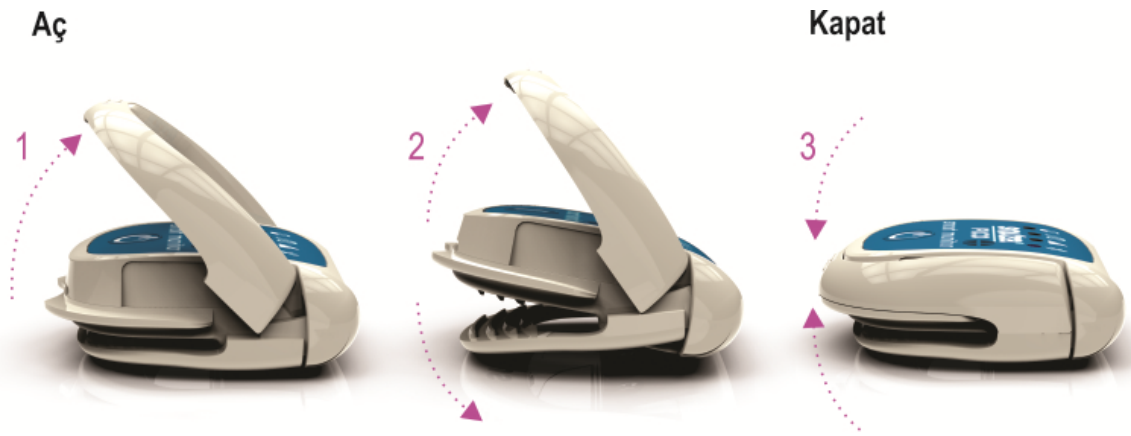

Snuzza Pico'nun bebeğinizin karınında, göbek deliğine yakın bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Bebeğiniz yanına yatıyorsa cihaz hafifçe yanlara doğru da konumlandırılabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), aksi hekimler tarafından belirtilmediği sürece bebeklerin sırtüstü yatırılmalarını önermektedir.

<http://www.who.int/en/>

Sırt üstü uyuyan bebeklerin karnının orta bölgesine tutturun. Yan yatan bebeklerin yanlarına tutturulabilir.

Snuzza Pico kullanım sırasında klipsinin açıldığını size alarmla bildirir. Alarm başlamadan önce Snuzza Pico 7 saniye boyunca

cihazı kapatmanız veya duraklatmanız için size sinyal verecektir. Klips takip eden 3 saniye sonunda da açık kalırsa "Klips Açık" alarmı devreye girecektir.

7.2 Açma/Kapama

Snuza Pico açma tuşuna (6) basarak açılabilir ve aynı tuşa (6) 2 saniye süreyle basılı tutarak kapatılabilir. Eşlik eden başlangıç ve kapanma sinyal tonları duyulacaktır (bkz. 7.5).

Snuza Pico alternatif olarak uygulama üzerinden de (uygulama ayarlarından etkinleştirilmesi kaydıyla) açılıp/kapatılabilmektedir. Bu özellik cihazı açmayı unutup bebeğinizin bezine taktığınızda bebeğinizi rahatsız etmeden cihazı açmanızı sağlar.

7.3 Duraklatma

Snuza Pico bebeğiniz uyuduğu sırada hareket, vücut sıcaklığı ve pozisyonunu takip etmek için tasarlanmıştır. Ancak, bebeğiniz uyumadığı sırada (emzirirken, bezini değiştirirken, vs...) yanlış alarmların önlenmesi amacıyla "Duraklatma" (Pause) fonksiyonu, cihazın (uygulama üzerinden ayarlanabilir aralıkta) duraklatılmasına olanak tanır.

Duraklatma fonksiyonu uygulama üzerinde "Pause" butonuna basarak da etkinleştirilebilir.

7.4 Cihazın Şarj Edilmesi

Snuza Pico'nun taşıma çantası (12) aynı zamanda cihazın pilini şarj etmek için kullanılan bir şarj ünitesidir.



7.5 Gösterge Lambaları Başlatma ve Kapanma Sinyalleri Cihazın güç düğmesi ile başlatılması

Snuza Pico güç tuşuna (6) basılarak açıldığında gösterge lambaları (1,2,3,4) başlatma sinyal sesi eşliğinde soldan sağa doğru yanacaktır. Başlatma sinyal sesinden hemen sonra Pil Gösterge Lambası (1) yanıp sönerek pil durumunu bildirecektir. Pil Gösterge Lambasının renklerine göre anlamları şöyledir:-

●	Yeşil	Pil dolu
●	Sarı	Pil seviyesi düşük, cihaz ancak birkaç saat daha çalışır
●	Kırmızı	Pil seviyesi çok düşük, Cihazı şarj edin
● ♪	Kırmızıya eşlik eden kapanma sinyali	Pil cihazı çalıştıramayacak kadar düşük, Pico otomatik olarak kapatıldı. Cihazı şarj edin.

Uygulama kullanılarak cihazın başlatılması

Snuza Pico uygulama üzerinden başlatıldığında gösterge lambaları aynı şekilde soldan sağa doğru yanar ancak başlatma sesli sinyali duyulmaz.

Pilin durumu uygulama ekranında görülür, dolayısıyla pil seviyesi için cihazın üzerindeki gösterge lambasını takip etmenize gerek olmaz.

Cihazın güç düğmesi ile kapatılması

Snuza Pico güç tuşuna (6) basılarak kapatıldığında gösterge lambaları kapanma sinyal sesi eşliğinde sağdan sola doğru yanacaktır.

Cihazın Uygulama Üzerinden Kapatılması

Snuza Pico uygulama üzerinden kapatıldığında gösterge lambaları aynı yanar ancak kapanma sesli sinyali duyulmaz.




7.6 Hareket Gösterge Lambası

Hareket Gösterge Lambası (2) hareketle beraber yanıp söner:-

	Yeşil	Solunum Güçlü
	Sarı	Solunum Zayıf
	Kırmızı	Solunum Çok Zayıf

7.7 Bluetooth Düşük Enerji

Bluetooth Gösterge Lambası (4):-

	Mavi	Akıllı telefon/tabletinize bağlandığı zaman her 2 saniyede bir mavi yanar
	Pembe	Duraklatma esnasında her 2 saniyede bir pembe yanar
	Pembe yanıp sönüyor	Başlatmadan hemen sonra 6 kez pembe yanması sunucuda sizin için önemli bir bildirim olduğun anlamına gelir. Bu önemli mesajı Snuza Connect Portal'ındaki (connect.snuza.com) hesabınıza giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz

7.8 Pil Göstergeleri

Başlatmada

Yukarıda "Başlatma ve Kapanma Sinyalleri"nde anlatıldığı gibi.

Pil seviyesi azaldığında (Snuza Pico Kullanımdayken)

Pil Gösterge Lambası 5 saniyede bir kırmızı yanar ve 60 saniyede bir çift sinyal sesi duyulur.

Pil seviyesi aşırı düştüğünde (Snuza Pico Kullanımdayken)

Pil Gösterge Lambası 5 saniyede bir kırmızı yanar ve 10 saniyede bir çift sinyal sesi duyulur.

Cihaz Şarj Edilirken

Cihaz şarj edilirken Pil Gösterge Lambası yeşil yanıp söner.

Şarj işlemi bittiğinde, Pil Gösterge Lambası sürekli olarak yeşil yanar.

7.9 Alarm Göstergeleri

Solunum durdu - Snuzza Pico alarm verir ve eş zamanlı olarak Alarm Gösterge Lambası (3) yanıp söner. Uygulama aynı anda alarm verecektir.

Düşme - Snuzza Pico alarm verir ve eş zamanlı olarak Alarm Gösterge Lambası (3) yanıp söner. Uygulama aynı anda alarm verecektir.

Sistem hatası - Snuzza Pico cihaz ve uygulama üzerinde daha düşük frekanslı bir sinyal verir.

Klips (7) açık alarmı - 10 saniye boyunca sesli uyarı sinyali ve müteakiben 3 kesintisiz alarm duyulur ve Uyarı Gösterge Lambası yanıp söner. Uygulama üzerinde de uyarı sesi duyulacaktır.

Uygulama - Yukarıda belirtilen cihaz alarmları dışında uygulama üzerinden de alarm verilir. Uygulama üzerinden düşük ve yüksek vücut sıcaklığı seviyeleri, solunum oranları ve pozisyon alarmları ayarlanabilir.

7.10 Şarj Gösterge Lambaları

Şarj ünitesi prize bağlı olduğunda şarj cihazı üzerinde bulunan Güç Gösterge Lambası (14) yanar. Şarj cihazı üzerinde bulunan Güç Gösterge Lambası (14) şarj durumuna göre değişmez, sadece cihaza güç geldiğini bildirmek üzere yanar. Şarj cihazı bağlandığında Snuzza Pico'nun şarj olup olmadığını yukarıda belirtilen uyarı işaretlerinden anlayabilirsiniz.

7.11 Giyim

- Snuzza Pico bebek bezlerinin katlanmış elastik bantları veya elastik pantolonların bel kısmına tutturulabilir.
- Bebeğin cildi ile Snuzza Pico arasında kumaş olması önerilmez.
- Snuzza Pico giysiler üzerinde kullanılamaz.
- Cihaz kalın kıyafetlerin altında kalırsa alarm sesi duyulmayabilir. Bebeğin kalın giysiler giydiği ve/veya battaniye

altında uyuduğu durumlarda alarmın duyulabildiğinden emin olun.

8. UYANDIRMA ALARMI

Not: Akıllı telefon bağlı olduğu durumda tüm uyarı ve alarmlar, aynı zamanda gerçek zamanlı veriler uygulama üzerinden görülebilir. Cihaz kullanımdayken 15 saniye boyunca solunum hareketi algılanmadığı takdirde, Snuzza Pico bebeği uyandırmak için nazikçe titreşim uygular. Solunum hareketi takip eden 5 saniye içerisinde tekrar başlarsa, Hareket Gösterge Lambası (2) her solunumda bir kere kırmızı yanar; bu durum solunumun 15 saniye boyunca algılanmadığı anlamına gelir. Uyandırma Alarmı etkin durumdayken uyandırma işlemi 3 defa arka arkaya gerçekleşirse Hareket Gösterge Lambası (2) her 2 saniyede bir sinyal sesi eşliğinde kırmızı yanar. Bu alarm size bebeğinizin solunumunun 3 defa 15 saniye boyunca durakladığı ve bu sürenin sonunda başarıyla uyandırıldığını bildirir. Not:- Uyandırma Alarmı çalarken cihaz bebeğinizin solunumunu takip etmeye devam eder. Uyandırma Alarmı, cihaz her açıldığında otomatik olarak devreye alınır.

9. PİL

9.1 Pil Göstergesi

Cihaz çalışır durumdayken pilin azaldığı takdirde Batarya Gösterge Lambası (1) aşağıdaki şekilde yanar:-

Pil Gösterge Lambası 5 saniyede bir kırmızı yanar ve 60 saniyede bir çift sinyal sesi duyulur. Pil seviyesi aşırı düştüğünde Pil Gösterge Lambası 5 saniyede bir kırmızı yanar ve 10 saniyede bir çift sinyal sesi duyulur. Cihazı daha fazla kullanmadan şarj edin (bkznz. blm. 10.3 Bataryanın Şarj Edilmesi). Sinyal sesi Power/Mode tuşuna basarak kapatılabilir.

9.2 Pil Ömrü

Snuza Pico'nun bataryası tek şarjla yaklaşık olarak 2 hafta kullanılabilir. Ancak bu süre kullanıma göre değişir.

9.3 Cihazın Şarj Edilmesi

Snuza Pico'nun taşıma çantası aynı zamanda cihazın pilini şarj etmek için kullanılan bir şarj ünitesidir.

10. BAKIM

10.1 Cihazın İmhası

Cihaz, pil ve cihaz kutusu, ülkenizin, pillerin atılması ve geri kazanımı ile ilgili yasalara uygun biçimde atılmalıdır.

10.2 Temizleme ve Saklama

- Kiri çıkarmak için nemli bezle dikkatlice silin. İnatçı kirler için az miktarda sabun kullanılabilir.
- Zarar verebilecek kimyasallar içerebileceğinden başka temizlik malzemelerini kullanmayın.
- Cihaz su sıçramalarına karşı dayanıklıdır, su geçirmez özellikte değildir. Suya daldırmayın. Islanırsa derhal kurulayın.
- Taşıma esnasında Snuza Pico'nuzu koruyucu kılıfı içinde muhafaza edin. Snuza Pico'yu şarj ünitesi içerisinde ve nemli yerlerde tutmayın.
- Pil Ömrünün Uzatmak İçin:-
 - Cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa tamamen şarj ettikten sonra saklayın.
 - Snuza Pico'nun pilinin tamamen boşalmasına veya boş şekilde uzun süre kalmamasına dikkat edin.

11. SORUN GİDERME

- 11.1 Bebeğinin bezinin doğru şekilde bağlandığı ve cihazın doğru bir şekilde beze tutturulduğundan emin olun (bknz. Blm. 6 Bebek Bezinin Bağlanması, blm. 7.1 Snuzza Pico'nun sabitlenmesi).
- 11.2 Pil hatası. Pil Gösterge Lambası (1) kırmızı yanar.

Daha fazla bilgi için www.snuza.com adresini ziyaret edin.

12. FERAGATNAME

Kullanıcılar cihazı riski kendilerine ait olmak üzere kullanırlar. Snuzza International (Pty) Ltd, üyeleri, çalışanları, acenteleri, yüklenicileri, temsilcileri, üreticileri, distribütörleri ve ortakları ("SNUZA"), cihazın kullanımı veya üretimi ile doğrudan veya dolaylı olarak alakalı oluşabilecek kayıp, zarar veya yaralanmalardan veya cihazın kusurlarından kaynaklı olarak kullanıcıların veya diğer şahısların görebileceği kayıp, zarar veya yaralanmalardan sorumlu tutulamaz ve hangi nedenle olursa olsun doğacak yükümlülükler ve güvenceler bu belge ile hariç bırakılmış olup kullanıcı da bu tür yükümlülükten Snuzza International (Pty) Ltd.'yi sorumlu tutamaz.

13. GARANTİ

Ürün, satın alındığı tarihten itibaren 12 ay boyunca üretim ve işçilik hatalarına karşı garanti altındadır. Garanti, kargo bedeli hariç olmak üzere, cihazın bedelsiz olarak yenisiyle değiştirilmesini kapsar. Garantimiz bu ürünün satışının yapıldığı tüm ülkeleri kapsar. Kullanıcı bu ürünü kullanarak, doğabilecek tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılır. Bu garantinin hükümlerini önceden haber vermeden istediğimiz zaman

değiştirme hakkımız saklıdır. Bu garanti, cihazın pilini, yanlış ve hatalı kullanımı veya nakliye hasarını kapsamamaktadır.

14. MEVZUATA İLİŞKİN BİLGİLER




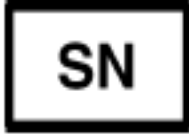

Snuza Pico ve Şarj Ünitesinin FCC uyumluluk beyanı:-

Bu Cihaz FCC (Bölüm 15) Kuralları ile uyumludur. Cihazın kullanılması aşağıda belirtilen şartlara bağlıdır:

- (1) Cihaz zararlı sinyallere sebep olmamalıdır;
- (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek sinyaller de dahil olmak üzere, alınan tüm sinyalleri kabul etmelidir.

Bu cihaz, insan içinde veya kontrolsüz ortamlarda RF'ye maruz kalma ile ilgili FCC gerekliliklerini yerine getirir.

15. TEKNİK TANIMLAR

	Vücut ile temas BF
	CE 1999/5/EC, 2001/95/EC, 89/336/EEC (TV Rheinland) uyarınca CE işareti
	Federal İletişim Komisyonu - ABD uyarınca FCC işareti
IP52	Cihazın dış muhafazası damlayan su girişine karşı korumalıdır
	Cihaz Seri Numarası (ilk iki rakam cihazın üretim yılını ifade eder)
	Cihazın yönetmeliklere uygun olarak atılması için ilgili bölümü okuyun
Hizmet Ömrü	Snuza Pico'nun beklenen kullanım ömrü üretim tarihinden itibaren 5 yıldır

Çevre Koşulları	İzin verilen çevresel çalışma koşulları: · Isı: 5 °C TO 40 °C · Nem: 15% - 93%, Yoğunlaşmayan · Basınç: 700HPA - 1060HPA
Nakiye için izin verilen çalışma koşulları ve cihaz koruyucu paketinden çıkarıldıktan sonra kullanımlar arasında saklama koşulları:	· 25°C nispi nem kontrolü olmaksızın; ve Yoğunlaşmayan nispi nem seviyesi %93'e kadar +70°C
Güç Kaynağı:	Dahili güç kaynağı
Pil Özellikleri:	Lityum Polimer
Ses basınç seviyesi:	10 cm'de 85dBm

İLETİŞİM:

Snuza Pico'nin kullanımını veya bakımı ile ilgili yardım veya beklenmedik işlem bildirmek için bizimle irtibata geçin:

İnternet: www.snuza.com/contact.php

E-posta: support@snuza.com

Tel: +27 (0)21 461 8530

Adres: Unit 11 Roeland Square, Roeland Street, Cape Town 8001,
South Africa