

snuzza[®] **PICO 2**

Quick Start Guide
מדריך להתחלה
מהירה

Thank you
for choosing
snuza[®]

and for letting us be a part of your
parenting journey.

We would love to see a photo of your little one
wearing their Snuza monitor!

Please tag us on social media:



@snuzamonitors



@snuza

We'd greatly appreciate your review on our
social media platforms via
support@snuza.com.

Your feedback helps to further our work in
promoting safe sleep for infants worldwide.

IMPORTANT: Register your Snuza monitor to
ensure that it is not a pre-owned device. Follow the
instructions in the Warranty section of this booklet.

The Snuza Family
www.snuza.com

30 Days extended warranty

IMPORTANT: proof of purchase is required to validate warranty.

This monitor comes with a 1-year warranty that starts from the date of original purchase, verified by a sales receipt. We'll extend your warranty by 30 days when you register your device within 7 days of purchase.

Here's how to extend your warranty:

1. A. Register as a user on snuza.com/register, follow the prompts to complete registration and add your device, **OR**
B. If you have already registered, log in and scan the QR code below to register your device, or navigate to www.snuza.com/account/device/add/.
2. Enter your device's serial number and your child's details.
3. Upload your proof of purchase and enter the purchase date, and save.

To get product support:

1. Log into snuza.com.
2. Go to your product's dashboard and click on your device's serial number.
3. Click on the 'Get Support' button.
4. Enter your product support query, then click the 'Send' button.
5. We will be in contact via email to try and resolve your issue.
6. If we are unable to resolve the issue, then the warranty claim process becomes available.
7. You can do this either on your product's dashboard by clicking the 'Report fault' button or the link provided in the email that you will receive.



If you have any feedback or questions, please contact us via your product's dashboard by clicking the 'Send a message' button or email us at support@snuza.com.

Welcome to the Snuza Family!
The Snuza Team

Pico 2 Quick Start Guide

Snuza Connect App Setup:

1. Download the Snuza Connect app.
2. Follow the prompts to register.
3. Activate your account via the e-mail link.
4. Once activated, add the Pico 2 to your account.
5. You can find the serial number on the side of the Pico 2 by lifting its top lever.

Snuza Pico 2 Device Setup:

Charge your Snuza Pico 2

1. Attach the micro USB power cord to the charging cradle base. A red light will appear on the charging cradle base to indicate it has power.
2. Open the charging cradle lid and place your Pico 2 in the correct position.
3. Close the lid.
4. The battery light on the Pico 2 will flash while charging and turn solid green when fully charged.

Attach your Snuza Pico 2:



1. Lift the Pico 2's top lever to release the clip. **(fig.1)**
2. Fold over the top edge of the nappy/diaper and attach the Pico 2 to your child's nappy/diaper. Keep your fingers between the Pico 2 and child's skin. Check that the Pico 2 has a snug fit. **(fig.2)**
3. Ensure that the clip is properly closed once placed. **(fig.3)**
4. Check that no skin is pinched by gently sweeping your fingers between the skin and clip. **(fig.4)**

Switch your Pico 2 on and start monitoring:

1. Switch the Pico 2 on by briefly pressing the power button.
2. All indicator lights will flash and a start-up tone will be heard.
3. Alternatively, switch the Pico 2 on by pressing the power button in the app. The start-up tone will be silent if controlled via the app.
4. Only use the Pico 2 when your child is in a motionless bed/cot.

Scan the QR code for the full instruction manual



IMPORTANT: Update your Pico 2's firmware before use



For support contact us through support@snuza.com

Regulatory Information: FCC compliance statement for Pico and charging cradle. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This device meets the FCC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments. Canadian regulatory statement for Pico and charging cradle. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). This device complies with the safety requirements for RF exposure in accordance with RSS-102 Issue 5 for portable use conditions. **Disclaimer:** Customers use this monitor at their own risk. Snuza International (Pty) Ltd, its members, employees, agents, contractors, representatives, manufacturers, distributors and associates ("SNUZA") shall not be held liable for any loss, damage or injury suffered by the customer or any other person arising from, or in connection with, the use or manufacture of the monitor, including loss, damage or injury suffered by the customer or any other person as a result of any defects in respect of the monitor, and all warranties, and any other liability from whatsoever cause arising, are hereby excluded. The customer hereby indemnifies Snuza International (Pty) Ltd in respect of any such liability. **Guarantee:** Snuza International (Pty) Ltd guarantees this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of 12 months from the original date of purchase, verified by a sales receipt.

תודה שבחרתם

snuza®

ושנתתם לנו להיות חחלק בתהליך המופלא של ההורות.

נשמח מאוד לקבל מכם תמונה של הצוציק שלכם עם
הסנוזה שלו

בבקשה תייגו אותנו במדיה החברתית

 @snuzamonitors  @snuza

נודה מאוד אם תקדישו זמן ותשומת לב לתכנים שלנו
בכתובת: support@snuza.com

המשובים שלכם יעזרו לנו להמשיך ולקדם שינה בטוחה
לתינוקות ברחבי העולם

חשוב: רישמו את הסנוזה החדש שלכם בכדי לוודא שלא
היה רשום בעבר על משתמש אחר. עקבו אחר ההוראות
בפסקת האחריות

משפחת סנוזה
www.snuza.com

30 יום הארכה לאחריות

חשוב: נדרשת הצגת חשבונית הרכישה למימוש האחריות. מכשיר זה נושא אחריות לשנתיים מיום הרכישה המופיע במסמך הרכישה שלו. האחריות תוארך ב 30 יום אם תרשמו את המכשיר באתר סנוזה העולמי תוך 7 ימים מרכישתו

איך להאריך את האחריות למכשיר:

1. עקוב אחר ההנחיות כדי להשלים את www.snuza.com/register. הירשם כמשתמש ב-QR-הרישום ולהוסיף את המכשיר שלך, או ב. אם כבר נרשמת, היכנס וסרוק את קוד ה-www.snuza.com/account/device/add/ למטה כדי לרשום את המכשיר שלך, או לנווט אל
2. הכניסו את מספרו הסידורי של המכשיר שלכם
3. העלו את צילום מסמך הרכישה, הכניסו את תאריך הרכישה ושימרו (לחצו SAVE)

לקבלת תמיכה למוצר:

1. היכנסו לאתר www.snuza.com.
2. היכנסו ל"לוח המכוונים" שלכם והקליקו על המספר הסידורי של מכשירכם.
3. לייצור על קבל עזרה (Get Support).
4. רותפכ לע וצחילו סכתלאש תא ודילקה Send - שלח.
5. צוות סנוזה יצור איתכם קשר למייל בכדי לענות לשאלתכם.
6. באם תיווצר בעיה שלא נוכל לפתור אז תופעל האפשרות של האחריות המורחבת.
7. תוכלו להפעיל את האחריות בלוח המכוונים שלכם בלחיצה על כפתור Report fault - דווח על תקלה, או בלחיצה על הקישור שיופיע במייל שנשלח לכם



אם יש לכם שאלות או הערות כלשהן, העבירו לנו אותן על-ידי לחיצה על כפתור שלח הודעה בלוח המכוונים שלכם Send a message, או שילחו לנו מייל לכתובת: support@snuza.com

צוות סנוזה מאחל לכם: ברוכים הבאים למשפחת סנוזה

פיקו-2 מדריך להתחלה מהירה

להתחלת העבודה עם האפליקציה


1. הורידו את האפליקציה
2. ענו על השאלות בכדי להירשם
3. הפעילו החשבון דרך הקישור שתקבלו במייל
4. לאחר ההפעלה הוסיפו את הפיקו שלכם לחשבונכם
5. המספר הסיידורי של הפיקו נראה בצד המכשיר אחרי שתרימו את מנוף הנעילה

להתחלת עבודה עם הפיקו שלכם

טענו את המכשיר

1. חברו את כבל הטעינה לעריסת הטעינה של המכשיר. נורית אדומה צריכה להידלק וכך תדעו שהמכשיר מחובר לחשמל
2. פיתחו את מכסה עריסת הטעינה ומקמו את הפיקו על מגעי הטעינה
3. סיגרו את המכסה של עריסת הטעינה
4. נורית הטעינה על הפיקו תהבהב כשהוא נטען ותהפוך לירוק קבוע בסיום הטעינה

השימוש במכשיר (הצמדתו לחיתול)

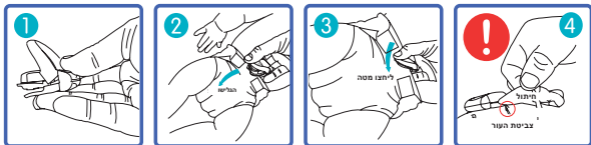

1. הרימו את המנוף העליון לשחרור ידית ההצמדה.
2. קפלו החוצה את השוליים העליונים של החיתול (להכפלת עוביו) והגלישו את הפיקו עליהם, שימו אצבע בין עורו של התינוק למכשיר בכדי להימנע מצביטה
3. וודאו שהסגר סגור ונעול ושאינו צובט את עורו של התינוק.
4. וודאו זאת בכך שתעבירו בעדינות אצבע בין הסגר ועורו של התינוק.

הדלקה והתחלת פעולה

1. הדליקו את הפיקו על-ידי לחיצה קצרה על כפתור ה"פאואר".
2. כלל הנוריות יבהבו וישמע צליל המאשר את התחלת הפעולה.
3. דרך נוספת להפעיל את הפיקו שלכם היא על-ידי לחיצה על כפתור ה"פאואר" שבאפליקציה. במצב זה לא ישמע צליל ההפעלה. השימוש במכשיר צריך להיות רק כשהתינוק העריסה או במיטה אבל לא בזמן תנועה או נסיעה.

סירקו את הבר-קוד בכדי
לראות את ההוראות



חשוב: נכון לעדכן את
גירסת התוכנה של
הפיקו לפני התחלת שימוש



לתמיכה פנו אלינו בכתובת: support@snuza.com

מכשיר זה עומד בכל דרישות הרשות הפדרלית האמריקאית לתקשורת - FCC

דיסקליימר (תניית פטור): לקוחות המשתמשים במכשיר עושים זאת על-דעתם ובאחריותם בלבד. חברת סנוזה וכל הקשורים בה לרבות עובדיה, סוכניה ומפיציה לא יהיו אחראים לכל הפסד, נזק חומרי או גופני שיגרמו ללקוח או לאחר הנובע או המקושר לשימוש או לייצור של המכשיר. האחריות הינה רק למכשיר עצמו

אחריות: חברת סנוזה אחראית לכך שמוצר זה הינו חופשי מתקלות בחומרים או בייצור, למשך 12 חודשים מתאריך הקניה שלו המופיע בתעודת הרכישה

BP2ISR01

