

snúza[®]

PICO 2

Quick Start Guide
Rövid üzembe
helyezési útmutató

Thank you
for choosing

snuza[®]

and for letting us be a part of your
parenting journey.

We would love to see a photo of your little one
wearing their Snuza monitor!

Please tag us on social media:



@snuzamonitors



@SnuzaGlobal

We'd greatly appreciate your review on our
social media platforms or via
support@snuza.com.

Your feedback helps to further our work in
promoting safe sleep for infants worldwide.

IMPORTANT: Register your Snuza monitor to
ensure that it is not a pre-owned device. Follow the
instructions in the Warranty section of this booklet.

The Snuza Family
www.snuza.com

30 Days extended warranty

IMPORTANT: proof of purchase is required to validate warranty.

This monitor comes with a 1-year warranty that starts from the date of original purchase, verified by a sales receipt. We'll extend your warranty by 30 days when you register your device within 7 days of purchase.

Here's how to extend your warranty:

1. A. Register as a user on snuza.com/register, follow the prompts to complete registration and add your device, **OR**
B. If you have already registered, log in and scan the QR code below to register your device, or navigate to www.snuza.com/account/device/add/.
2. Enter your device's serial number and your child's details.
3. Upload your proof of purchase and enter the purchase date, and save.

To get product support:

1. Log into snuza.com.
2. Go to your product's dashboard and click on your device's serial number.
3. Click on the 'Get Support' button.
4. Enter your product support query, then click the 'Send' button.
5. We will be in contact via email to try and resolve your issue.
6. If we are unable to resolve the issue, then the warranty claim process becomes available.
7. You can do this either on your product's dashboard by clicking the 'Report fault' button or the link provided in the email that you will receive.



If you have any feedback or questions, please contact us via your product's dashboard by clicking the 'Send a message' button or email us at support@snuza.com.

Welcome to the Snuza Family!
The Snuza Team

Pico 2 Quick Start Guide

Snuza Connect App Setup:

1. Download the Snuza Connect app.
2. Follow the prompts to register.
3. Activate your account via the e-mail link.
4. Once activated, add the Pico 2 to your account.
5. You can find the serial number on the side of the Pico 2 by lifting its top lever.

Snuza Pico 2 Device Setup:

Charge your Snuza Pico 2

1. Attach the micro USB power cord to the charging cradle base. A red light will appear on the charging cradle base to indicate it has power.
2. Open the charging cradle lid and place your Pico 2 in the correct position.
3. Close the lid.
4. The battery light on the Pico 2 will flash while charging and turn solid green when fully charged.

Attach your Snuza Pico 2:



1. Lift the Pico 2's top lever to release the clip. **(fig.1)**
2. Fold over the top edge of the nappy/diaper and attach the Pico 2 to your child's nappy/diaper. Keep your fingers between the Pico 2 and child's skin. Check that the Pico 2 has a snug fit. **(fig.2)**
3. Ensure that the clip is properly closed once placed. **(fig.3)**
4. Check that no skin is pinched by gently sweeping your fingers between the skin and clip. **(fig.4)**

Switch your Pico 2 on and start monitoring:

1. Switch the Pico 2 on by briefly pressing the power button.
2. All indicator lights will flash and a start-up tone will be heard.
3. Alternatively, switch the Pico 2 on by pressing the power button in the app. The start-up tone will be silent if controlled via the app.
4. Only use the Pico 2 when your child is in a motionless bed/cot.

Scan the QR code for the full instruction manual



IMPORTANT: Update your Pico 2's firmware before use



For support contact us through support@snuza.com

Regulatory Information: FCC compliance statement for Pico and charging cradle. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This device meets the FCC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments. Canadian regulatory statement for Pico and charging cradle. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). This device complies with the safety requirements for RF exposure in accordance with RSS-102 Issue 5 for portable use conditions. **Disclaimer:** Customers use this monitor at their own risk. Snuza International (Pty) Ltd, its members, employees, agents, contractors, representatives, manufacturers, distributors and associates ("SNUZA") shall not be held liable for any loss, damage or injury suffered by the customer or any other person arising from, or in connection with, the use or manufacture of the monitor, including loss, damage or injury suffered by the customer or any other person as a result of any defects in respect of the monitor, and all warranties, and any other liability from whatsoever cause arising, are hereby excluded. The customer hereby indemnifies Snuza International (Pty) Ltd in respect of any such liability. **Guarantee:** Snuza International (Pty) Ltd guarantees this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of 12 months from the original date of purchase, verified by a sales receipt.

Köszönjük, hogy a

snuza[®]

-t választották, és hogy részesei lehetünk
a szülői útjuknak.

Szívesen látnánk egy fotót a kisgyermekéről, amint
viseli a Snuzza készüléket!

Kérjük, jelöljön meg minket a közösségi médiában:



@snuzamonitors



@SnuzzaGlobal

Nagyrá értékelnénk, ha véleményezné a közösségi
médiaplatformjainkon, vagy a support@snuza.com
oldalon keresztül.

Visszajelzései segítik munkánkat a csecsemők
biztonságos alvásának előmozdításában világszerte.

FONTOS: Regisztrálja Snuzza készülékét, hogy
megbizonyosodjon arról, hogy nem használt
eszköztől van szó. Kövesse ezen füzet Garancia
címmű részében található utasításokat.

A Snuzza család
www.snuza.com

30 napos kiterjesztett garancia

FONTOS: a garancia érvényesítéséhez a vásárlás igazolása szükséges. Erre a készülékre 1 év jótállás vonatkozik, amely az eredeti vásárlás dátumától kezdődik, és az eladási bizonylattal igazolható. Ha a készüléket a vásárlástól számított 7 napon belül regisztrálja, 30 nappal meghosszabbítjuk a garanciát.

Így hosszabbíthatja meg a garanciát:

1. A. Regisztráljon felhasználóként a [snuza.com/register](https://www.snuza.com/register) oldalon, kövesse az utasításokat a regisztráció befejezéséhez és a készülék hozzáadásához, VAGY B. Ha már regisztrált, jelentkezzen be, és szkennelje be az alábbi QR-kódot a készülék regisztrálásához, vagy navigáljon a www.snuza.com/account/device/add oldalra.
2. Adja meg a készülék sorozatszámát és gyermeke adatait.
3. Töltse fel a vásárlást igazoló bizonylatot, adja meg a vásárlás dátumát, és mentse el.

Terméktámogatás igénybevétele (csak angol nyelven):

1. Jelentkezzen be a [snuza.com](https://www.snuza.com) oldalra.
2. Menjen a termék műszerfalára, és kattintson a készülék sorozatszámára.
3. Kattintson a 'Get Support' gombra.
4. Írja be a terméktámogatási kérdését, majd kattintson a 'Send' gombra.
5. E-mailben fogunk kapcsolatba lépni Önnel, hogy megpróbáljuk megoldani a problémáját.
6. Ha nem tudjuk megoldani a problémát, akkor a garanciális igényérvényesítési eljárás válik elérhetővé.
7. Ezt a termék műszerfalán teheti meg a 'Report fault' gombra kattintva, vagy a kapott e-mailben található linkekre kattintva.



Ha bármilyen visszajelzése vagy kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a termék műszerfalán keresztül a 'Send a message' gombra kattintva, vagy írjon nekünk a support@snuza.com e-mail címre.

Üdvözöljük a Snuza családban!
A Snuza csapat

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy a Snuza® termékét választotta. A Snuza® a termékek fejlesztése és gyártása során a legnagyobb gondossággal jár el, valamennyi terméke megfelel a nemzetközi szabványoknak. A cég erre a termékre 12 hónap garanciát vállal, mely a vásárlás napjától számítva él. A vásárlás napján kapott számlát, vagy fizetési blokkot és/vagy a készülék bélyegzett jótállási jegyét okvetlenül őrizze meg, mert jótállási igényét ezekkel érvényesítheti. A jótállás időtartama alatt minden olyan hiba esetén, amelynek eredete gyártási hibára vagy anyaghibára vezethető vissza, a termék hibás főegységét cseréljük. A készülékek utólagos javítását a gyártó a készülék jellege miatt nem engedélyezi.

A csere időtartama a bejelentéstől (a termék beérkezésétől) számított kb. 15nap. Ez a jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, amely javítási kísérlet, fizikai behatás, rossz feszültség, helytelen alkalmazás, vagy használat, ill. nem megfelelő elemek használata miatt sérült meg. A garancia szintén nem vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonos javíttatta a készüléket, vagy átalakította.

Meghibásodás esetén a termék cseréjét 3 munkanapon belül az eladó szerv, ezt meghaladóan a forgalmazó végzi, kérjük utóbbi esetben ezt okvetlenül jelezze írásban az alábbi elérhetőségen: info@snuza.hu

JÓTÁLLÁSI JEGY

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikkre a 151/2003 (IX.22.) Korm. Rendelet alapján.

1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - Ptk. 8:1. §). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. § alapján.
2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. A termék, vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás a jelentős részre újra kezdődik.
3. Kérjük, a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót.
4. Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval.
5. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható.
6. A jótállási igény a teljes körűen kitöltött, eredeti jótállási jeggyel érvényesíthető.
7. A jótállási kötelezettség teljesítése az importőrt terheli.
8. A fogyasztó a jótállás iránti igényét a forgalmazónál (importőrnél) érvényesítheti. Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.
9. A készüléket meghibásodás esetén az importőrhez kell eljuttatni, postai úton, a jótállási jeggyel együtt. A forgalmazó a feladott készüléket átveszi, feltéve ha a fogyasztó a küldeményről és a meghibásodásról előzetesen írásban tájékoztatta. Személyes átvételre, leadásra nincs mód.

10. Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni.

11. A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogait a következő jogszabályok és rendeletek szabályozzák: 151/2003 (IX.22) Kormányrend.; Ptk. XXIV. fejezet; 19/2014 (IV.29) NGM Rend. Hibás teljesítés miatt a fogyasztónak joga van árleszállítást kérni, illetve el is állni a szerződéstől.

12. Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben azzal érvényesíthet, ha bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a szerződést megkötöttnek kell tekinteni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a számlát/blokkot és/vagy lebélyegzett, kitöltött jótállási jegyét feltétlenül őrizze meg, hogy kétséget kizáróan igazolni tudja a fogyasztói szerződés megkötését.

13. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

14. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

15. Jótállási igény nem érvényesíthető a következő esetekben:

- A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése esetén a jótállási jegy érvénytelen.
- A használati utasítástól eltérő, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
- Átalakítás, hibás, vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
- Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre, vagy tartozékokra.
- Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikkben végzett bármilyen beavatkozás esetén.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A forgalmazó ezúton nyilatkozik, hogy a Snuza® készülékek a CE nemzetközi jelzéssel vannak ellátva, mely jelzi, hogy a termékek megfelelnek a forgalmazásához szükséges nemzetközi és magyar szabvány-előírásoknak és irányelveknek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a forgalmazótól kérheti el.

TERMÉK TÍPUSA: SNUZA® PICO 2	A TERMÉK GYÁRTÁSI SOROZATKÓDJÁ:
VÁSÁRLÁS DÁTUMA:	ELADÓ SZERV BÉLYEGZŐJE, ALÁÍRÁS:

Pico 2 Rövid üzembe helyezési útmutató

Snuza Connect applikáció beállításai:


1. Töltse le a Snuza Connect alkalmazást.
2. Kövesse az utasításokat a regisztrációhoz.
3. Aktiválja a fiókját az e-mail-en kapott linkkel.
4. Aktiválás után, adja hozzá a Pico készülékét a fiókjához.
5. A Pico 2 gyári számát a készülék oldalán találja a csipesz alatt.

Snuza Pico 2 készülék beállításai:

Töltse fel a Snuza Pico 2 készülékét

1. Csatlakoztassa a micro USB kábelt a dokkoló tárolóhoz. A piros led világítani fog a dokkolón, jelezve, hogy áram alatt van.
2. Nyissa fel a dokkoló tetejét és helyezze bele a Snuza Pico 2 készüléket megfelelő helyzetben.
3. Csukja le a dokkoló tetejét.
4. Az elemjelző led villog a Pico 2-n, amíg tölt, és folyamatosan világítani fog ha teljesen feltöltött.

Snuza Pico 2 készülék elhelyezése:

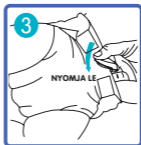

1. Nyissa fel a Pico 2 csipeszt. **(1.ábra)**
2. Hajtsa le a pelenka felső részét, és csúsztassa a Pico 2-t a baba pelenkájára úgy, hogy tegye az ujját a baba bőre és a csipesz közé, hogy ne csípje be a baba bőrét. Ellenőrizze, hogy a Pico 2 szorosan illeszkedik. **(2.ábra)**
3. Győződjön meg róla, hogy megfelelően záródott a csipesz, miután elhelyezte. **(3.ábra)**
4. Ellenőrizze, hogy nem csípte be a baba bőrét, finoman végigsimítva az ujját a bőr és a csipesz között. **(4.ábra)**

A Pico 2 bekapcsolása és a megfigyelés megkezdése

1. Kapcsolja be a Pico 2-t a bekapcsoló gomb rövid megnyomásával.
2. Minden jelzőfény villog, és indítási hang hallható.
3. Más módon: kapcsolja be a Pico 2-t az alkalmazásban a bekapcsoló ikon megérintésével. Az indítási hang néma, ha az alkalmazáson keresztül vezéreljük.
4. Csak akkor használja a Pico 2 készüléket, ha a baba mozdulatlan kiságyban van.

Szkennelje be az alábbi QR kódot a teljes használati útmutatóért



FONTOS: Frissítse a Pico 2 szoftverét használat előtt



Támogatásért lépjen velünk kapcsolatba a support@snuza.com címen (angol nyelven)

Szabályozási információk: FCC megfeleléségi nyilatkozat a Pico készülékhez és a töltőhöz. Ez a készülék megfelel az FCC szabályok 15. részében leírtaknak. Üzemeltetése az alábbi két feltétel függvényében történik: (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát; (2) a készüléknek el kell viselni bármilyen vett interferenciát, beleértve azt az interferenciát nem kívánatos működést idézhet elő. Ez a készülék megfelel az FCC RF sugárzás szabályozatlan környezetben való kitétségére vonatkozó határértékeinek. Kanadai szabályozási nyilatkozat a Snuza Pico készülékhez és a töltő dokkolóhoz: A termék megfelel a vonatkozó Industry Canada RSS szabványainak. Üzemeltetése az alábbi két feltétel függvényében történik: (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát; (2) a készüléknek el kell viselni bármilyen vett interferenciát, beleértve azt az interferenciát is, ami nem kívánatos működést idézhet elő. CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B). Ez a készülék megfelel a rádiófrekvencia kibocsátás biztonsági előírásainak az RSS-102 5.tételben leírtaknak megfelelően a hordozható használati feltételek szerint. Lemondó nyilatkozat: A vásárlók saját kockázatukra, felelősségükre használják a készüléket, és a Snuza International (Pty) Ltd., és annak tagjai, alkalmazottjai, ügynökei, szerződött partnerei, képviselői, gyártói, forgalmazói és egyesületei ("SNUZA") nem tarthatóak felelősnek semmilyen hátrányért, károsodásért, vagy sérülésért, amit a vevő, vagy más személy, aki kapcsolatban volt a készülék használatával, vagy gyártásával, elszenvedett, beleértve azt a veszteséget, kárt, vagy sérülést, amit a vevő vagy más személy a készülék hibájából, vagy minden jótállásból, vagy minden egyéb jog alapján felmerült okból elszenvedett, ezek a felelőségek ezáltal kizártak, és a vevő ezáltal semmilyen kárpótlásra nem jogosult. **Garancia:** A Snuza International (Pty) Ltd garantálja, hogy a készülék nem hibásodik meg sem anyagában, sem a működésében 12 hónapon belül az eredeti vásárlás időpontjától számítva, amit blokkal vagy számlával igazolni szükséges.



BP2HUN01

