

# snúza<sup>®</sup>

---

## HERO<sup>MD</sup>

Portable Baby Breathing Monitor

## Hordozható baba légzésfigyelő készülék

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


**OLVASSA EL AZ EGÉSZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT HASZNÁLAT ELŐTT**



**PHMD00503**

**Fontos: Ez a hordozható légzésfigyelő készülék nem biztos,  
hogy minden életveszélyes eseményt érzékelni tud.**

A SNUZA regisztrált védjegye a

 **Snuza International (Pty) Ltd**  
Unit 9 Roeland Square  
Roeland Street  
Cape Town 8001  
South Africa



Készült a Dél-afrikai Köztársaságban

Szabadalmaztatott termék, minden jog fenntartva.



**Advena Ltd**  
**Tower Business Centre, 2nd floor.**  
**Tower Street, Swatar, BKR, 4013**  
**Malta**  
**+44 (0) 1926 800 153 | [info@advenamedical.com](mailto:info@advenamedical.com)**

Szabadalmi számok :


2008212520 | 2,677,990 | EP 2124748 | 08709966.9/2124748 | 200300 | 2009-548789 |  
MX/a/2009/008469 | 578560 | 2,009,134,887 | 2009/05652 | 2359364 | 8,461,996

**TARTALOM**

1. <b>FONTOS – OLVASSA EL ELŐSZÖR!</b> .....	4
2. Bemutakozás.....	6
3. Elővigyázatosság És Ellenjavallatok .....	7
4. A Készülék Részai .....	9
5. Rövid Működési Ismertető.....	10
6. Pelenka Illeszkedési Tudnivalók .....	11
7. Snuzs Hero <sup>MD</sup> Elhelyezése .....	11
8. Működés .....	13
8.1 Indítás.....	13
8.2 Megfigyelés .....	14
8.3 Ruházat .....	15
9. Beállítások .....	16
9.1 Kattogó "tikk" hang beállítása.....	16
9.2 Rezgő funkció.....	16
9.3 Alacsony légzésszám riasztás .....	17
10. Elem .....	18
10.1 Elemjelző lámpa .....	18
10.2 Elem élettartam .....	18
10.3 Elemcsere .....	19
11. Karbantartás .....	21
11.1 Ártalmatlanítás .....	21
11.2 Tisztítás és tárolás .....	21
12. Problémamegoldás .....	21
13. Lemondó Nyilatkozat.....	22
14. Garancia .....	22
15. Technikai Adatok.....	23

## 1. FONTOS - OLVASSA EL ELŐSZÖR

Lényeges, hogy a Hero<sup>MD</sup> színes, rugalmas felső részében található érzékelő mindig érintkezzen a baba hasával.

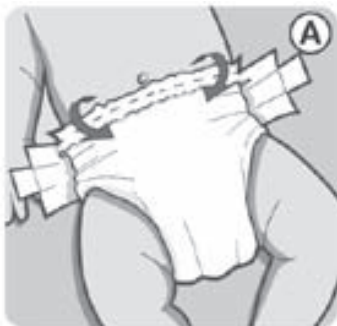

### MINDIG:

Használjon megfelelő méretű pelenkát. A túl nagy pelenka bő lehet a baba hasánál, ami miatt a Hero<sup>MD</sup> elveszítheti az érintkezést a baba hasával.



Hajtsa vissza a pelenka derékövi részét a Hero<sup>MD</sup> felcsiptetése előtt, hogy megfelelő vastagságú legyen. Használja a pelenka rögzítőjét úgy, hogy elég szorosan, de kényelmesen rögzítse a baba hasához.

Rögzítse a Hero<sup>MD</sup>-t a pelenkához az övcsipesszel úgy, hogy teljesen tolja rá.





Győződjön meg róla, hogy a Hero<sup>MD</sup> derékszögben helyezkedik el a pelenkán, és hogy az érzékelő (1) érintkezik a baba hasával.

Nyomja meg az ON/OFF Be/Ki (6) kapcsoló gombot a Hero<sup>MD</sup> működtetéséhez.



Mindig kövesse az alábbi utasításokat, hogy biztos lehessen abban, hogy a készülék figyelni gyermek levegzését, és hogy megelőzhesse a téves riasztást, amit az érintkezés megszakadása okozhat.

### MEGJEGYZÉS:

Óvatosan kezelje a Snuzza Hero<sup>MD</sup>-t, hogy elkerülje az övcsipesz, vagy az érzékelő sérülését.



## 2. BEMUTATKOZÁS



### **Rendeltetésszerű használat:**

A Snuz Hero<sup>MD</sup> egy hasi mozgásfigyelő készülék a csecsemő-légzéskimaradás érzékeléséhez.

### **Rendeltetésszerű felhasználó:**

Ezt a készüléket a csecsemőgondozó használhatja. A gondozónak meg kell értenie a használati útmutató utasításait és a biztonsági intézkedéseket.

### **Használati környezet:**

Otthoni használatra

A Snuz Hero<sup>MD</sup> biztonságosan és megfelelően figyeli gyermeke légzőmozgásait, amíg ő alszik, megteremtve egy beavatkozási lehetőséget arra az esetre, ha a baba légzése leállna.

A teljes mobilitásért Önnek csak gyermeke pelenkájára kell csiptetnie a Hero<sup>MD</sup>-t. Nincsenek kábelek, érzékelő lapok, nincs szükség lapos fekvőfelületre, vagy külső áramforrásra.

Csiptesse fel, kapcsolja be és tapasztalja meg a nyugalmat.

A Snuz Hero<sup>MD</sup> még a finom hasi mozgásokat is érzékeli, és riaszt, ha a baba percenkénti légzőmozgása 8 alá esik (ez a figyelmeztetés kikapcsolható), vagy

20mp-en keresztül nem érzékel légzőmozgást. A Snuzo Hero<sup>MD</sup> először gyengéden rezeg 15mp után, hogy megpróbálja felébreszteni a babát. Ha a rezgéssel sikerül felébreszteni a babát, és ezek után érzékeli a baba légzőmozgását, akkor minden légzésnél pirosan villog a légzésjelző lámpa (3). Három rezgés bekapcsolása után a Rezgő riasztás figyelmezteti Önt, hogy gyermeke légzése három alkalommal leállt 15mp-re. A rezgő riasztás egy rövid csippanás és a piros légzésjelző lámpa (3) 2mp-kénti villanása jelzi. A megfigyelés folytatódik, ha a rezgő riasztás aktív, de jelzi a csecsemőgondozónak, hogy szükség lehet a baba megvizsgálására. A rezgő riasztási mód kikapcsolható vagy az ON/OFF gomb, vagy a MODE/OFF gomb rövid megnyomásával, vagy a készülék kikapcsolásával és újra bekapcsolásával. A rezgő riasztás funkció kikapcsolható úgy, hogy működés közben 2mp-ig megnyomja a MODE/OFF gombot. A funkció kikapcsolását egy rövid csippanás és a légzésjelző lámpa (3) és a riasztást jelző lámpa (4) piros villogása jelzi. Ha a készüléket kikapcsolják, majd visszakapcsolják, akkor a funkció újra visszaáll a bekapcsolt módba.

### 3. ELŐVIGYÁZATOSSÁG ÉS ELLENJAVALLATOK

- Ez a készülék nem alkalmas betegség vagy állapot, mint pl. obstruktív apnoé megelőzésére vagy megfigyelésére.
- Külső forrásból előforduló mozgásokat, mint pl. babakocsi tolása, járműben utazás, vagy repülés a Hero<sup>MD</sup> érzékelője érzékelheti. Ne hagyatkozzon a Hero<sup>MD</sup> -re ha mozgások fordulhatnak elő külső forrásokból.
- A megfigyelt baba egyedül kell aludjon a saját ágyában, különben a készülék annak a személynek a mozgását vagy légzését is érzékelheti, akivel egy ágyban alszik, és nem fog riasztani addig, amíg mozgást érzékel, még akkor sem, ha a baba légzése leáll.
- Rádiófrekvenciás készülékek, mint pl. mobiltelefonok, babaőrzők, kamerás babaőrzők, vezeték nélküli telefonok, adó-vevők, vezeték nélküli routerek, stb. interferenciát okozhatnak a készülék légzés- vagy mozgásfigyelési

működésében. Ne helyezze a készüléket 1m-nél közelebb ilyen rádiófrekvenciás készülékhez.


- A készüléken semmiféle átalakítás nem engedélyezett.
- Egy készüléket csak egy baba megfigyelésére használjon.
- Az apró részek, melyeket nem rendeltetésszerű használat során távolítanak el, fulladást okozhatnak.
- Abban az esetben, ha a baba bőre érzékenyvé válik ott, ahol a készülék érintkezik a baba bőrével, olvassa el a 8.3 fejezetet. Ha a bőrérzékenység továbbra is fennáll, lépjen velünk kapcsolatba a [www.snuza.com](http://www.snuza.com) oldalon.
- Tartsa távol a háziállatoktól, kártevőktől és más gyermekektől, mert a károsodás nem megfelelő működést okozhat.
- Ne tegyen semmit a Hangszóró nyílásokba (2).
- Ne kerüljön semmiféle folyadék a Hangszóró nyílásokba.
- Kerülje az érzékelő szükségtelen hajlítását (1 ábra).
- Ne használjon aránytalanul nagy erőt a csipesz hajlításához (2 ábra).
- Ne nyomja az elemfedél kioldóját (10) a védőkortát (11) mögé.

## 4. A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

### ELŐLNÉZET



### HÁTULNÉZET

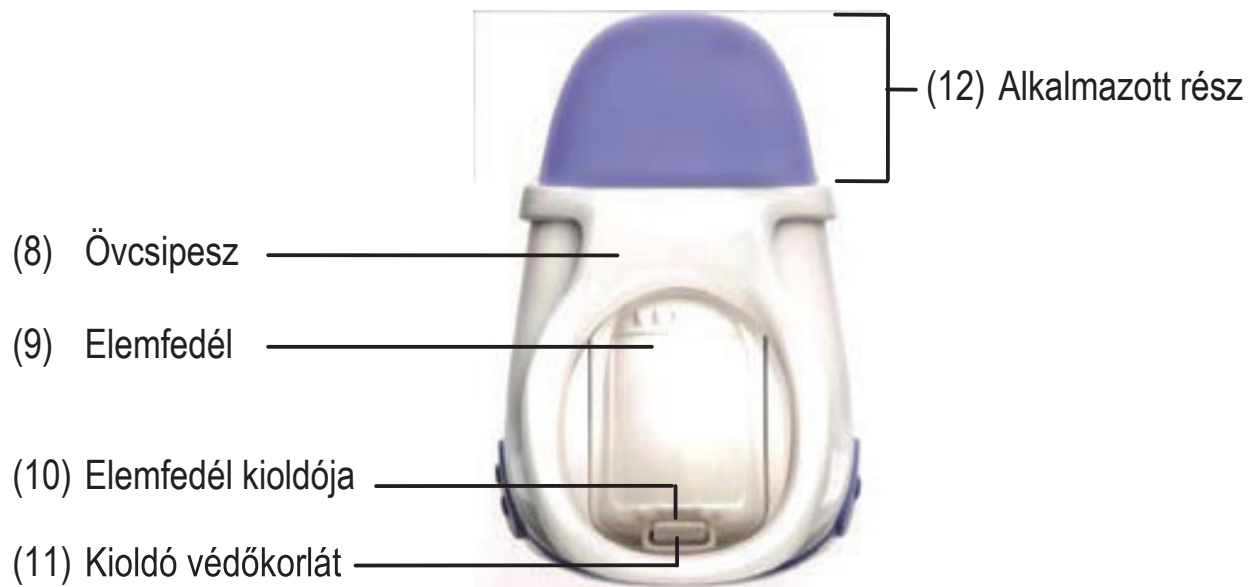


## 5. RÖVID MŰKÖDÉSI ISMERTETŐ

- 5.1 Fontos: Használjon megfelelő méretű pelenkát és győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkedik (*Isd. 6. Pelenka illeszkedési tudnivalók c. részt*).
- 5.2 Ne kapcsolja be a készüléket, amíg felcsípteti a baba pelenkájára.
- 5.3 Kapcsolja be röviden megnyomva az ON/OFF Be/Kikapcsoló gombot (7)
- 5.4 Az indítási teszt során a jelzőlámpák felvillannak, rezeg a stimulátor, és 3hangot játszik le a készülék, elvégzi az elemtesztet és az érzékelő tesztelését. Tegye a készüléket egy íróasztalra az érzékelő teszt elvégzéséhez.
- 5.5 Ha az érzékelő tesztelt, egy indítási hangot hall.
- 5.6 Csatolja fel a Snuzza Hero<sup>MD</sup>-t a pelenkára úgy, hogy az Érzékelő (1) érintkezzen a baba hasával (*Isd. 7. rész a Hero<sup>MD</sup> elhelyezése*).
- 5.7 A légzésjelző lámpa (3) villog minden mozgásnál. Lsd. a 8.2 Megfigyelés c. részt a teljes leírásért.
- 5.8 Ha 15mp-ig nem érzékel légzést, akkor a készülék rezegni kezd, hogy megpróbálja felébreszteni a babát.
- 5.9 Ha a légzés visszatér 5mp-en belül a rezgést követően, akkor a légzésjelző lámpa (3) pirosan villog, hogy jelezze volt egy 15mp-es periódus légzés nélkül.
- 5.10 Három rezgés után, a rezgő figyelmeztetés bekapcsol – Hero<sup>MD</sup> csipog minden 2.mp-ben és a légzést jelző lámpa (3) pirosan villog minden csippanásnál.
- 5.11 Ha légzés nélküli időtartam eléri a 20mp-et, akkor hallható a teljes riasztás, a Hero<sup>MD</sup> rezeg és a riasztást jelző lámpa (4) pirosan villog.
- 5.12 A gondozónak meg kell néznie a babát.
- 5.13 A riasztást csak a készülék kikapcsolásával lehet leállítani.
- 5.14 A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF Be/Kikapcsoló gombot (7) és a MODE/OFF Mód/Kikapcsoló gomb (6) gombot egyszerre. Egy kikapcsoló hangot fog hallani és a készülék kikapcsol.

## 6. !PELENKA ILLESZKEDÉSI TUDNIVALÓK

**Fontos:** A megfelelő pelenkázás alapvető a Hero<sup>MD</sup> működéséhez. A pelenka felső vékony ragasztós részét rá kell hajtani a vastagabb részre mielőtt bezárja a pelenkát (ez lesz az a rész ahová a Hero<sup>MD</sup>-t csatlakoztatni kell). A pelenkát kényelmesen rögzítse a babára, úgy hogy a felső része éppen a köldök alatt legyen. A testhezálló pelenka kilazulása miatt a készülék elvesztheti az érintkezést a babával, és így tévesen riaszt. A nagyon "teli", vagy nedves pelenka is okozhat kitágulást a pelenkán. Ha a baba az oldalán fekszik, akkor a Hero<sup>MD</sup>-t a köldök és matrac közé kell helyezni középre.

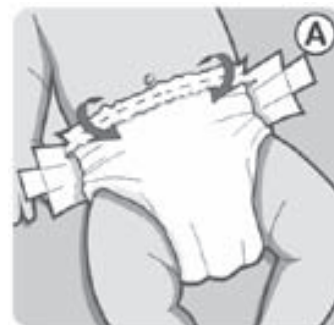

## 7. HERO<sup>MD</sup> ELHELYEZÉSE

Ha csatlakoztatja a Snuzza készüléket, tegye az ujjait a baba pelenkája és a baba bőre közé. Győződjön meg róla, hogy a készüléket biztonságosan felcsiptette a pelenkára elkerülve a baba bőrét, hogy nem sértse meg a babát a felcsiptetéskor.

Ellenőrizze, hogy az elemfedél (10) jól zár. Csíptesse fel a Hero<sup>MD</sup>-t a pelenkára, a csipeszt teljesen rátolva a pelenkára, ahogy a képen látszik:-





Győződjön meg róla, hogy az érzékelő (1) érintkezik a baba hasával a köldök környékén, vagy a különböző alvási pozíciókban az oldalához közelebb.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt ajánlja, hogy fektesse a babát a hátára, ha a gyermek orvosa ezt másképp nem javasolja.




<http://www.who.int/en/>

## 8. MŰKÖDÉS

### 8.1 Indítás

**A Snuza Hero<sup>MD</sup>-t ne kapcsolja be, amíg a pelenkára helyezi. A készüléket egy íróasztalra kell helyezni az önteszt elvégzés idejére.**

Kapcsolja be az ON/OFF Be/Kikapcsoló gomb (7) rövid megnyomásával. Elindul az indítási teszt, ami ellenőrzi a jelző lámpákat, a rezgő stimulátort, a hangos riasztást és a elemtöltöttségi szintet. Ha valamelyik hibás, akkor egy Teszt hiba riasztást fog hallani, és a készüléket nem lehet használni. Az elemteszt után az elemjelző lámpa 3-szor villog, és csippan. Az elemjelző fény színe a következőt jelenti:

	Zöld	Elem rendben
	Sárga/Narancs	Elem lemerülőben – a készüléket használhatja, de cserélje ki az elemet, amilyen hamar lehetséges.
	Piros	Elem lemerült – Hero <sup>MD</sup> nem használható, cseréljen elemet. Az alacsony elemjelző figyelmeztetés hallható.

Ha az elemjelző fénye zöld vagy sárga/narancs, akkor a Hero<sup>MD</sup> elvégzi az érzékelő tesztjét. Az érzékelő tesztelése 1 és 40mp között tarthat, ha a készülék nem érzékel mozgást.

Az érzékelő teszt során a készülék minden 2.mp-ben csippan és a légzést jelző lámpa (3) valamint a riasztást jelző lámpa (4) pirosan villog. A készüléket egy asztalra kell helyezni a teszt alatt. Ha a 40mp letelt, akkor egy hibariasztást fog hallani, és a készüléket nem lehet használni.

Ha az érzékelő teszt rendben lefutott, akkor egy indítási hangot hall, és légzést jelző lámpa (3) zölden villog jelezve, hogy a megfigyelés elkezdődött és a Hero<sup>MD</sup> elhelyezhető a baba pelenkáján. (Isd.7.rész Hero<sup>MD</sup> elhelyezése).





Figyelmeztetés: Győződjön meg róla, hogy az elemtöltöttség elegendő a megfelelő működéshez (zöld vagy narancs). Egyéb esetben NE használja a készüléket. Ha az elemfeszültség túl alacsony a működéshez, az elemjelző lámpa (2) pirosan villog és minden másodpercben röviden csippan a készülék. Cserélje ki az elemet a következő használat előtt. (Isd. 10.3 Elemcsere c. rész).

A kikapcsoláshoz nyomja meg az ON/OFF (7) és a MODE/OFF (6) gombot együtt.



## 8.2 Megfigyelés

A megfigyelés alatt, a légzést jelző lámpa (3) jelzi a baba légzését, míg a riasztást jelző lámpa (4) figyelmeztet az esetleges problémákra.

Ha nem érzékel légzőmozgást, akkor a riasztást jelző lámpa pirosan villog minden 3.mp-ben. Ha légzést érzékel, akkor a légzést jelző lámpa (3) az alábbiak szerint villog minden légzésnél:-

	Zöld	Minden légzőmozgásnál, ha nem volt előriasztás, vagy rezgés.
	Sárga és légzésszám riasztás (dupla csippanó hang minden mp-ben)	A percenkénti légzésszám 8 alá csökken. Ha a légzésszám 8 fölé emelkedik percenként, a légzést jelző lámpa újra zölden villog, és a figyelmeztetés leáll. Ezen funkció kikapcsolásához Isd. 9.3 fejezet Légzésszám riasztás.
	Piros	Minden légzésnél Volt legalább egyszer 15mp-es légzésekimaradás, amikor a légzést a rezgés után újra érzékelte (Isd. alább).
!!!!!! 	Piros és Rezgő riasztás	A rezgő riasztás azt jelzi, hogy történt 3 rezgés. Ezen funkció kikapcsolásához Isd. 9.2 részt Rezgő riasztás.

A riasztást jelző lámpa (4) az alábbiak szerint jelez:-

	<p>Pirosan villog és rezeg, és 5-ször röviden csippan</p>	<p>Ha nem érzékel mozgást 15mp-ig, a Hero<sup>MD</sup> gyengéden rezegni kezd, hogy megpróbálja felébreszteni a babát. A riasztást jelző lámpa (4) pirosan villog és csipog. Ha újra légzést érzékel a következő 5mp-ben, akkor a légzést jelző lámpa (3) pirosan villog minden légzőmozgásnál. Ez jelzi, hogy történt 15mp-es légzésekimaradás.</p>
	<p>Pirosan villog és riaszt</p>	<p>Ha nem érzékel légzőmozgást további 5mp-ig a rezgést követően (összesen 20mp-ig), akkor a riasztás jelző lámpa (4) pirosan villog és magas riasztási hang hallatszik. A gondozónak azonnal meg kell néznie a babát. A riasztást a Hero<sup>MD</sup> kikapcsolásával (nyomja meg az ON/OFF (7) és a MODE/OFF (6) gombokat egyszerre).</p>

**MEGJEGYZÉS:** Ajánlott, hogy a szülő / gondozó képzett legyen arra a kezelésre vonatkozóan ami segíthet, ha a babánál légzésekimaradás történik.

### 8.3 Ruházat

- A Hero<sup>MD</sup>-t felcsiptetheti a pelenka visszahajtott derékrészére, vagy a rugalmas bugyi/nadrág derékrészére úgy, hogy az érzékelő (1) mindvégig érintkezzen a baba hasával.
- A készülék puha érzékelő része orvosi minőségű szilikonból készül, és hipoallergén. Ha esetleg mégis piros kiütés lenne a baba bőrén, ahol a készülék érintkezik vele, akkor javasolt egy vékony rétegű

ruhát tenni a baba bőre és a készülék közé, úgy hogy az érzékelő továbbra is érintkezzen. A készüléket át is helyezheti a baba hasán, hogy ne érintkezzen a piros kiütéssel, a baba oldala felé.

- A készüléket használhatja úgy is, hogy egy könnyű ruha (pl. rugdalózó) van a pelenka vagy a nadrág felett, amire a Hero<sup>MD</sup> csiptetve van.
- A túl sok ruha tompíthatja a riasztás hangját. Győződjön meg róla, hogy biztosan hallható a riasztás, ha a baba fel van öltöztetve, és/vagy be van takarva.

## 9. BEÁLLÍTÁSOK

### 9.1 Kattogó "tikk" hang beállítása

Ennél a beállításnál a Hero<sup>MD</sup> egy hallható 'tikk' hanggal is jelzi a légzőmozgásokat. A hallható 'tikk' hang kikapcsolásához, először győződjön meg róla, hogy a Hero<sup>MD</sup> be van kapcsolva, majd nyomja meg röviden (kevesebb, mint 1mp) a MODE/OFF gombot (6). Ha hangosítani szeretné ezt a 'tikk' hangot, akkor nyomja meg a MODE/OFF gombot még egyszer a közepes hangerőhöz, és újra a legmagasabb hangerőhöz. A kikapcsoláshoz nyomja meg röviden a MODE/OFF gombot 4-szer - a Hero<sup>MD</sup> egy hangos csippanással jelez. Ezt a funkciót használhatja babaőrzővel együtt is, hogy távolabbról is 'hallja' a baba mozgásait.

### 9.2 Rezgő funkció

A megfigyelés alatt, ha a készülék nem érzékel légzést 15mp-ig, akkor a Hero<sup>MD</sup> gyengéden rezegni kezd, hogy megpróbálja felébreszteni a babát. Ha a következő 5mp-ben újra légzést érzékel, akkor a légzést jelző lámpa (3) pirosan fog villogni a további légzőmozgásoknál, hogy jelezze, volt egy 15mp-es légzéskimaradás. A rezgő riasztással 3 ilyen rezgés aktiválás és sikeres felébresztés után a légzést jelző lámpa (3) pirosan villog minden 2.mp-ben és egy csippanó hangot ad. Ez figyelmeztet arra, hogy három

alkalommal 15mp-re leállt a baba légzése, majd a Hero<sup>MD</sup> rezgése után újra lélegezni kezdett. Megjegyzés:- A megfigyelés folytatódik a rezgő riasztás alatt is. A rezgő funkció automatikusan bekapcsolt állapotban van, amikor a készüléket bekapcsolja. A funkció kikapcsolásához győződjön meg róla, hogy a Hero<sup>MD</sup> be van kapcsolva, és nyomja meg a MODE/OFF gombot (6) legalább 2mp-ig, amíg egy csippanás hallatszik és a készülék röviden rezeg, és ezzel egyszerre a légzést jelző lámpa (3) és a riasztást jelző lámpa (4) pirosan villog. Ha újra be szeretné kapcsolni ezt a funkciót, akkor kapcsolja ki a Hero<sup>MD</sup>-t (nyomja meg az ON/OFF (7) és a MODE/OFF (6) gombokat egyszerre), majd kapcsolja be újra (a rezgő funkció bekapcsolt állapotban van ha a készüléket bekapcsolja).


### 9.3 Alacsony légzésszám riasztás

Az alacsony légzésszám riasztás figyelmeztet, ha a baba légzéseinek száma 8 alá csökken percenként. Ezt a riasztást jelzi, hogy a légzést jelző lámpa (3) sárgán villog és duplán csippan minden mp-ben. Ez a funkció automatikusan bekapcsolt állapotban van, amikor a Hero<sup>MD</sup>-t bekapcsolja. A funkció kikapcsolásához győződjön meg róla, hogy a Hero<sup>MD</sup> be van kapcsolva, majd nyomja meg az ON/OFF gombot (7) több, mint 2mp-ig, amíg dupla csippanásst hall és röviden rezeg a készülék, valamint a légzést jelző lámpa (3) és a riasztást jelző lámpa (4) sárgán villog. Ha újra be szeretné kapcsolni a funkciót, akkor kapcsolja ki a Hero<sup>MD</sup> készüléket (nyomja meg az ON/OFF (7) és a MODE/OFF (6) gombot egyszerre), majd kapcsolja be újra a készüléket. Az alacsony légzésszám riasztás alapértelmezve be van kapcsolva, ha a Hero<sup>MD</sup>-t bekapcsolja.

## 10. ELEM

### 10.1 Elemjelző lámpa

Ha a megfigyelés közben lemerül az elem, akkor az elemjelző lámpa (2) az alábbiak szerint jelez:-

	<p>3 hallható csippanás minden 4.mp-ben, és pirosan villog minden 2.mp-ben.</p>	<p>Az elem hamarosan lemerül. Cserélje ki az elemet a következő használat előtt <i>(Isd. 10.3 Elemcsere c. rész).</i></p>
---	---	---

### 10.2 Elem élettartam

Az elem élettartama a használatától függ. Az elem élettartama eltérő lehet, függően a napi használati időtől, és/vagy a riasztási időtől, és/vagy a riasztások számától. A készülék felesleges be és kikapcsolása is túl hamar lemerítheti az elemet. Ha a riasztások száma magas, akkor ellenőrizni kell a pelenkai elhelyezést.

A készülék garanciája nem vonatkozik az elemre.

Az átlagos használati idő kb. 4-6 hónap, ha kb. 8 órát használja naponta.

### 10.3 Elemcsere

Minden MD készülékhez: használjon CR2 (CR15270) elemet, ami a legtöbb kereskedőnél megtalálható. (a helyi forgalmazókról és az elem információkról tájékozódhat a [www.snuza.com](http://www.snuza.com) weboldalon).

10.3.1 Használja a körmét, vagy egy kicsi lapos csavarhúzó. Egy csípő mozdulattal (2. ábra és 3. ábra), finoman húzza vissza az elemfedél kioldóját (10) a készülék hátoldalán és emelje fel ezzel egyidőben az elemfedelelet (4. ábra).

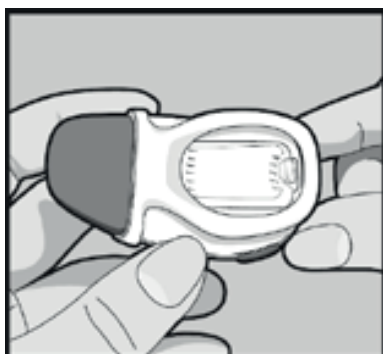


Fig 1

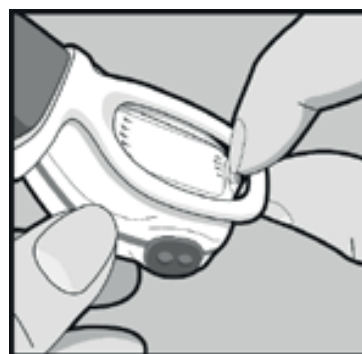


Fig 2

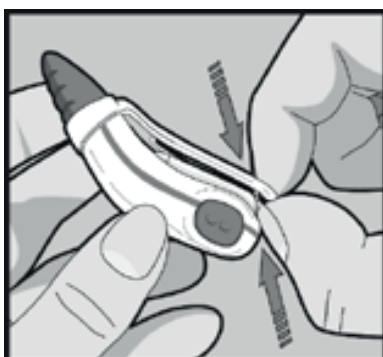


Fig 3



Fig 4

10.3.2 Vegye ki a lemerült elemet finoman a tenyerébe csapva a Hero<sup>MD</sup>-t a nyitott elemtartóval lefelé.

10.3.3 Tegye be az új elemet, először a negatív végét, ahogy az 5. ábra mutatja. Győződjön meg róla, hogy a polaritás helyes (a pozitív vége az elemen '+' jellel jelölve, és az elemtartóban is '+'-val jelölve). Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és győződjön meg róla, hogy jól zár (6. ábra).

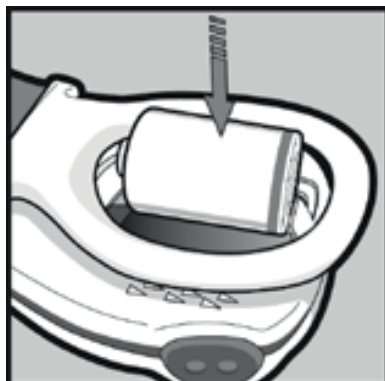


Fig 5



Fig 6

Ne használja a készüléket az elemtartó fedél nélkül.

10.3.4 Tesztelje a készüléket úgy, hogy bekapcsolja, és győződjön meg róla, hogy az elemjelző lámpa (2) zölden villog.

10.3.5 Ha a készülék riaszt az elemcsere után, csak nyomja meg az ON/OFF és az OFF/MODE gombokat egyszerre a kikapcsoláshoz.

**MEGJEGYZÉS:** Az elem helytelen elhelyezése biztonsági kockázatot jelent, kövesse az alábbi utasításokat.

## 11. KARBANTARTÁS

### 11.1 Ártalmatlanítás

Az elemet, a készüléket és a csomagolást az országban, az ezekre érvényes megsemmisítési és újrahasznosítási szabályok szerint kell eldobni és újrahasznosítani.

### 11.2 Tisztítás és tárolás

- Finoman törölje le egy nedves ruhával a szennyeződések. Enyhe szappant használhat a rongyon, a makacs kosz ellen.
- Ne használjon más tisztítószert, mert azok káros vegyszereket tartalmazhatnak.
- A készülék cseppálló, de nem vízálló. Ne mártsa vízbe. Ha nedves lesz, törölje rögtön szárazra.
- Amikor kicseréli az elemet, akkor a szennyeződést, ami beszorul az elemtartóba, egy száraz ruhával ki tudja törölni, ha az elemfedelelet (9) úgyis levette. Győződjön meg róla, hogy a tömítés is tiszta, mielőtt visszarakja az elemfedelelet, mert az kárt okozhat a tömítésben.
- Ha nem használja a készüléket, tegye a Hero<sup>MD</sup>-t a védőtokba a biztonságos tárolás miatt. Ne tárolja nedves, párás helyen.

## 12. PROBLÉMAMEGOLDÁS

- Ellenőrizze a helytelen rögzítést, és a Hero<sup>MD</sup> elhelyezését a pelenkán (*Isd. 6.rész Pelenka illeszkedési tudnivalók és 7.rész Hero<sup>MD</sup> elhelyezése*).
  - Elemhiba. Az elemjelző lámpa (2) piros (*Isd. 9.3 rész Elemcsere*).
- Kérjük látogassa meg a **www.snuza.com** weboldalt további információkért.




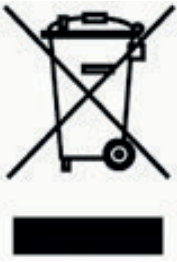
### **13. LEMONDÓ NYILATKOZAT**

A vásárlók saját kockázatukra, felelősségükre használják a készüléket, és a Snuzza International (Pty) Ltd., és annak tagjai, alkalmazottai, ügynökei, szerződött partnerei, képviselői, gyártói, forgalmazói és egyesületei ("SNUZA") nem tarthatóak felelősnek semmilyen hátrányért, károsodásért, vagy sérülésért, amit a vevő, vagy más személy, aki kapcsolatban volt a készülék használatával, vagy gyártásával, elszenvedett, beleértve azt a veszteséget, kárt, vagy sérülést, amit a vevő vagy más személy a készülék hibájából, vagy minden jótállásból, vagy minden egyéb jog alapján felmerült okból elszenvedett, ezek a felelősségek ezáltal kizártak, és a vevő ezáltal semmilyen kárpótlásra nem jogosult.

### **14. GARANCIA**

A Snuzza International (Pty) Ltd garantálja, hogy ez a termék mentes az anyaghibáktól, és nem hibásodik meg a működésében az eredeti vásárlás dátumától, amit blokkal vagy számlával igazolni szükséges, számított első 24 hónapban. A garanciális kötelezettség a termék cseréjére, javítására vonatkozik, de nem vonatkozik a szállítási költségekre. A garancia kiterjed minden országra, ahol a terméket forgalmazzák. A termék használója elfogadja az ebből következő felelősséget. Fenntartjuk a jogot ezen garanciális jogok megváltoztatására minden előzetes bejelentés nélkül. Ez a garancia nem vonatkozik az elemre, a helytelen alkalmazásra, manipulálásra, a helytelen használatból eredő és a szállítási sérülésekre.

## 15. TECHNIKAI ADATOK

	BF típusú részek
	CE jelzés a MDD 93/42/EEC II.melléklete szerint
<p><b>IP52</b></p>	IP52 A készülék háza védett a csepegő vízzel szemben
	Készülék gyári száma (az első két szám a gyártás évét jelöli)
	Lsd. az Ártalmatlanítás c. részt a készülék ártalmatlanításához
<p>Átlagos élettartam</p>	A Hero <sup>MD</sup> várható élettartama 2 év a gyártástól számítva.
<p>Környezeti feltételek</p>	<p>Megengedett környezeti működési feltételek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hőmérséklet: 5 °C és 40 °C között.</li> <li>· Páratartalom: 15% és 93% között, nem lecsapódó</li> <li>· Légnyomás: 700HPA és 1060HPA között</li> </ul>
<p>Megengedett környezeti feltételek</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 25 °C relatív páratartalom szabályozás</li> </ul>

szállításkor és tároláskor a védőtokból kivéve használatok között:	nélkül; és +70°C (93%-os páratartalom mellett, nem lecsapódó) között
Áramforrás:	Belső áramforrás
Elem specifikáció:	Gyakori név: CR2 IEC: CR17355 3.0 Volt 800 mAh Méret (mm): 26 x 15 x 15 Lithium
Hangnyomásszint:	75dBm 10cm-nél

Szkennelje be az alábbi QR kódot az elektromágneses kompatibilitási táblázat megtekintéséhez:



#### Kapcsolat:

A Snuza Hero<sup>MD</sup> működésével vagy karbantartásával, esetleg meghibásodással kapcsolatosan keressen minket:

Internet: [www.snuza.com/contact.php](http://www.snuza.com/contact.php)

Email: [support@snuza.com](mailto:support@snuza.com)

Tel: +27 (0)21 461 8530

Address: Unit 9 Roeland Square, Roeland Street, Cape Town 8001, South Africa